

7 AEDの使用

○乳児にも，AEDを使用します。

- ・未就学児用の電極パッドが入っている場合はそれを使います。本体に未就学児用モードに切り替えるスイッチが付いている場合には，未就学児用モードに切り替えます。



AEDの機種	傷病者の区分	小学生以上	未就学児
電極パッドで使い分ける機種(※)		小学生～大人用電極パッド	未就学児用電極パッド
電極モードを切り替える機種		通常モード	未就学児用モード

※AED本体に未就学児用の電極パッドが入っていない場合には，入っている電極パッドを使用する。


- ・電極パッドを貼る位置は，電極パッドに表示されているイラストに従い，心臓を挟み込む位置とします。
- ・未就学児用の電極パッドがなく，小学生～大人用の電極パッドを使用する際には胸と背中に貼るなどしてパッド同士が接触しないよう工夫が必要です。

○電気ショックを行ったら，直ちに胸骨圧迫を再開します。

電源を入れる

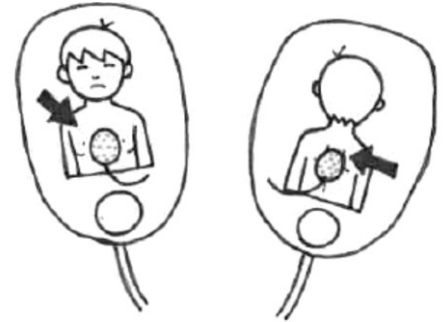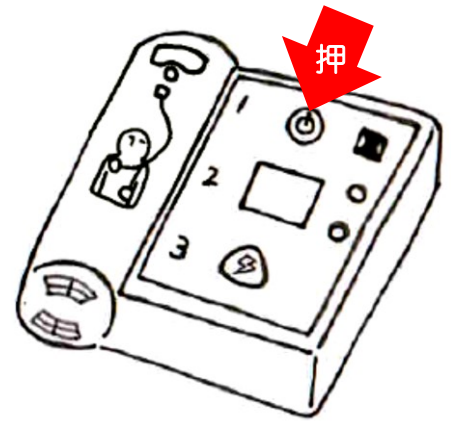

電極パッド

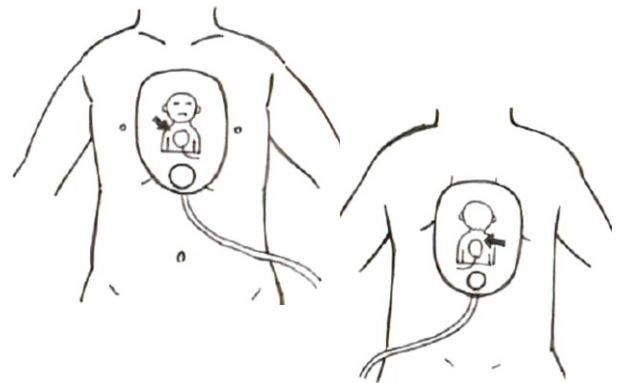

電極パッドを貼り付ける位置

8 AEDの使用と心肺蘇生の継続

○以後は，心肺蘇生とAED使用の手順を，救急隊員と交代するまで繰り返します。

☆心肺蘇生を中止するときは

①救急隊員と交代したとき

救急隊が見えたらすぐに救命処置をやめるのではなく，心肺蘇生を中断することなく，救急隊員に交代するまで継続します。その後救急隊員からの質問に答えて下さい。

②傷病者に普段どおりの呼吸が戻り，呼びかけへの反応や目的のある仕草が認められたとき

心肺蘇生をいったん中止し，慎重に傷病者を観察しながら救急隊を待ちます。この場合でも，AEDの電極パッドははがさず，電源も入れたままにしておきます。

