

## 7 AEDの使用

○乳児にも、AEDを使用します。

- ・AED本体に成人用と小児用の2種類の電極パッドが入っている場合や成人用モードと小児用モードの切替えがある場合には、小児用の電極パッドや小児用モードで使用して下さい。



AEDの機種	傷病者の区分	
	小学生以上	未就学児
電極パッドで使い分ける機種(※)	成人用電極パッド	小児用電極パッド
電極モードを切り替える機種	成人用モード	小児用モード

※AED本体に小児用の電極パッドが入っていない場合には、入っている電極パッドを使用する。


- ・電極パッドを貼る位置は、電極パッドに表示されている絵に従います。
- ・小児用の電極パッドがなく、成人用の電極パッドを使用する際にはパッド同士が接触しないよう工夫が必要です。

○電気ショックを行ったら、直ちに胸骨圧迫を再開します。

電源を入れる

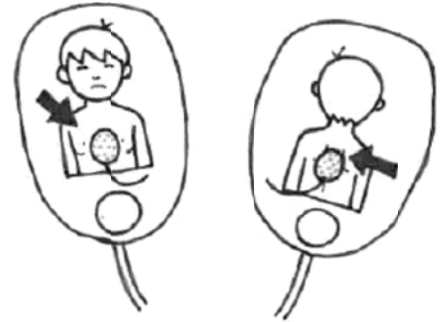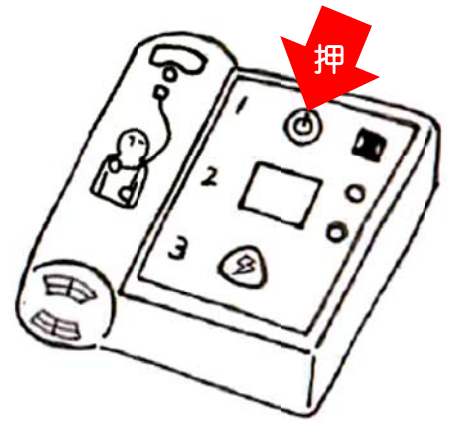

電極パッド

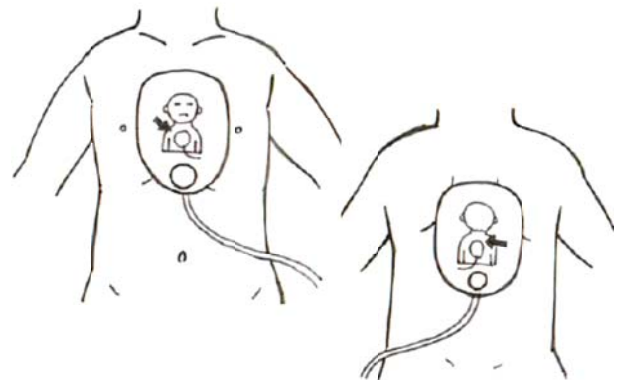

電極パッドを貼り付ける位置

## 8 AEDの使用と心肺蘇生の継続

○以後は、心肺蘇生とAED使用の手順を、約2分間おきに救急隊員と交代するまで繰り返します。

☆心肺蘇生を中止するときは

### ①救急隊に引き継いだとき

救急隊が到着したら、傷病者の倒れていた状況、実施した応急手当、AEDによる電気ショックの回数などをできるだけ詳しく伝えます。

### ②傷病者が目を開けたり、あるいは「普段どおりの呼吸」が出現したとき

心肺蘇生をいったん中止し、慎重に傷病者を観察しながら救急隊を待ちます。この場合でも、AEDの電極パッドははがさず、電源も入れたままにしておきます。

